

씨큐어덤 부직포 드레싱

Securederm Non Woven Dressing

부드러운 재질의 부직포, 저자극성 점착제를 사용한 신개념의 부직 반창고.

최상급 부직포 사용으로 신축성이 기존대비 뛰어나 부드러운 감촉으로 신체와 일체감을 형성하여 이물감을 최소화하였으며, 저자극 점착제 사용으로 기존의 알러지반응을 최소화 하였습니다.

사용의 편의성을 위하여 보이는 포장재질을 사용하고,이면지의 박리력을 조절하여 쉽게 제거되게 구성하였습니다.



Code	Size	Qty/box
[M3102124]	5cm x 7cm (2.5cm x 4cm)	50pcs
[M3103124]	10cm x 11cm (5.8cm x 7cm)	50pcs
[M3104124]	10cm x 16cm (5.9cm x 12cm)	50pcs
[M3105124]	9cm x 25cm (5cm x 20cm)	25pcs
[M3105124]	9cm x 30cm (5cm x 25cm)	25pcs

주식회사 제노메디칼
 경기도 수원시 장안구 팔달로 309번길 34
 T: 070-7579-1244
 F: 02-6280-1930
<http://www.genomedical.co.kr>

Securederm Non Woven Dressing

씨큐어덤 부직포 드레싱 - 용도 설명서

● 제품설명

Securederm Non Woven Dressing 은 외과, 정형외과, 흉부외과, 산부인과, 비뇨기과, 신경외과 등 다양한 과에서 수술 후 상처 부위에 사용하는 접착성 드레싱 제품으로 상처부위를 보호하는 제품입니다.

제품의 특징

1. 상처 보호 및 부드러운 부직포로 이질감이 적은 드레싱

씨큐어덤 부직포 드레싱은 최상급의 부직포를 사용하여 부드러운 제질로 이질감이 적어 상처를 보호하는데 최상의 조건을 가지고 있는 드레싱 제품입니다. 또한, 다른 오염물질의 침투를 막아주어 상처보호에 용이하며, 빠른 상처치유가 되도록 환경을 유지합니다.



2. 저자극성

저자극성 아크릴 접착제 사용으로 장기간 사용에도 피부자극이 적어 피부가 예민한 환자에게 적합한 제품입니다.



3. 통기성 및 유연성


최상급의 부직포의 사용으로 유연성이 좋아 신체 어느 부위에도 부착이 용이하며, 움직임이 자유롭습니다.



최상급의 부직포의 사용으로 유연성이 좋아 신체 어느 부위에도 부착이 용이하며, 움직임이 자유롭습니다.

4. 뛰어난 흡착력 및 들붙음방지

뛰어난 흡착력으로 삼출물 흡수하며 상처부위에 닿는 부직포가 폴리에틸렌망으로 코팅되어 있어 상처가 아물면서 발생하는 삼출물에 부직포가 들러붙지 않습니다.

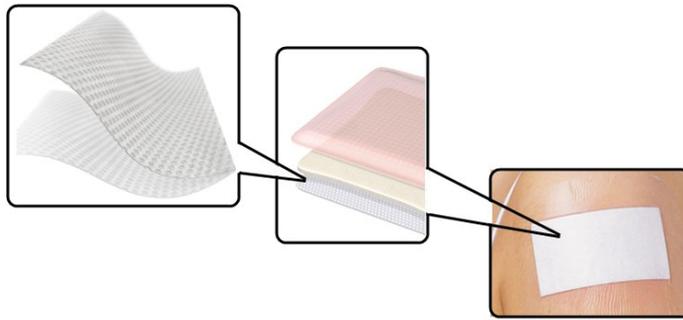

제품 사용 시 장점

1. 쉽고 간단하게 드레싱이 가능하여 간호사들의 드레싱 적용의 번거로움을 해결하여 업무의 효율성을 높일 수 있습니다.
2. 우수한 신축성으로 부착이 용이하며 상처면을 보호하고 청결관리에도 효율적입니다.
3. 타사 대비 저렴한 가격으로 병원의 부담을 줄일 수 있습니다.

보관방법

실온보관, 직사광선과 과열을 피하십시오.

제품 size 및 포장단위

Size	Qty/box
5cm x 7cm (2.5cm x 4cm)	50pcs
10cm x 11cm (5.8cm x 7cm)	50pcs
10cm x 16cm (5.9cm x 12cm)	50pcs
9cm x 25cm (5cm x 20cm)	25pcs
9cm x 30cm (5cm x 25cm)	25pcs